

# JMSドレンバッグ

- ◇ 尿路感染・汚染リスクなどを考慮し、安全性をさらに充実
- ◇ ニードルレス採尿ポートの装備により、機能性と操作性の向上を両立




# 低床ベッドに対応し、 より機能面を充実した閉鎖導尿タイプ

## 縦柵にも装着可能なマルチハンガー

ねじれることなく縦横どちらの柵にも装着が可能です。  
ベルトの固定も簡単になりました。




縦柵柱へ装着

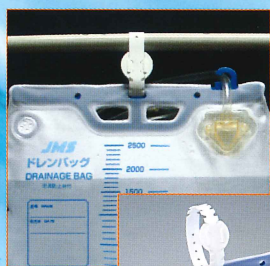

横柵柱へ装着

## ニードルレス採尿ポート

金属針を使用せず、安全に採尿が可能です。  
汎用のルーアースリンジが利用できます。

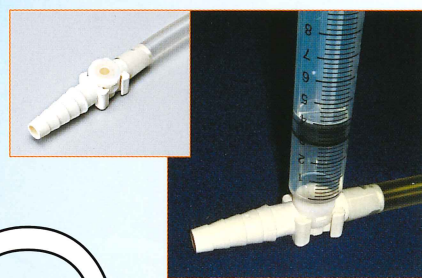

## 逆流防止弁付の ドリップチャンバー


尿の流れを確認できる  
ドリップチャンバーには、  
逆流防止弁が付いています。  
誤ってバッグが圧迫された場合  
でも、尿の逆流を防止します。

細菌の透過を  
防止するエアフィルタ

## 低床ベッドにも 対応可能な天地長

排尿チューブが床面に  
触れないように、天地長が  
短くなっています。縦柵を  
利用すると、より低床の  
ベッドにも対応できます。

クランプの形状や排尿チューブの柔らかさを改良し、  
開閉しやすくなりました。

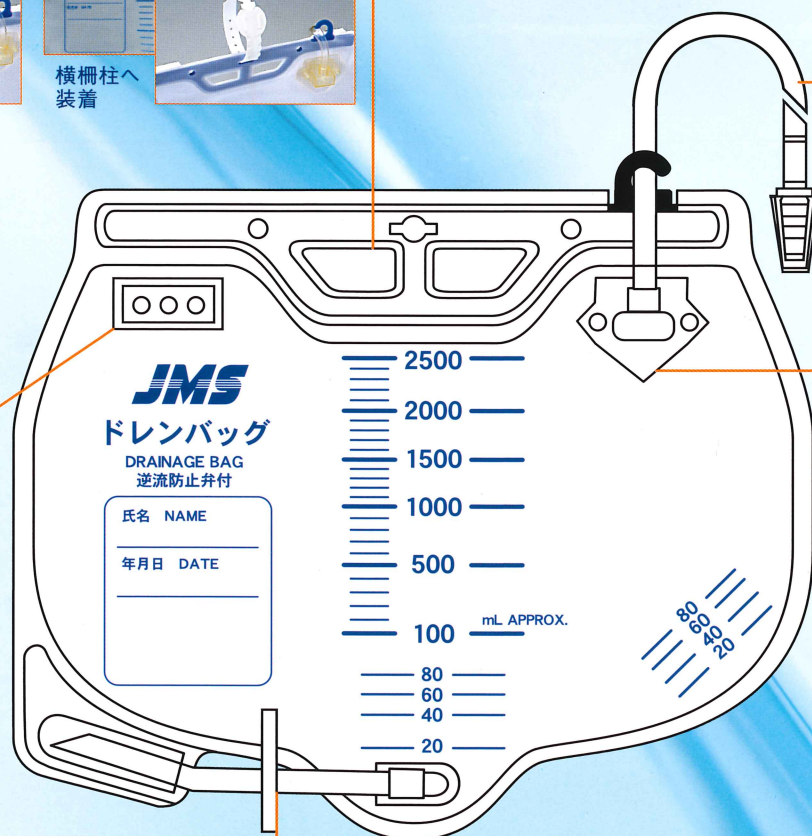

品番	型式	梱包単位
JU-BHNP	低床ベッド対応 ニードルレス採尿ポート付	5個×10箱
JU-BHN	低床ベッド対応	5個×10箱