

プラネクタ® 輸液セット

規格追加のご案内

シンプルで簡単な輸液ラインが欲しい……

末梢ラインも閉鎖式に変更したい……




……etc.


そのようなご意見をお聞きし、プラネクタ輸液ラインシステムに、

よりシンプルなプラネクタ1個付の輸液セットを規格追加!

プラネクタ

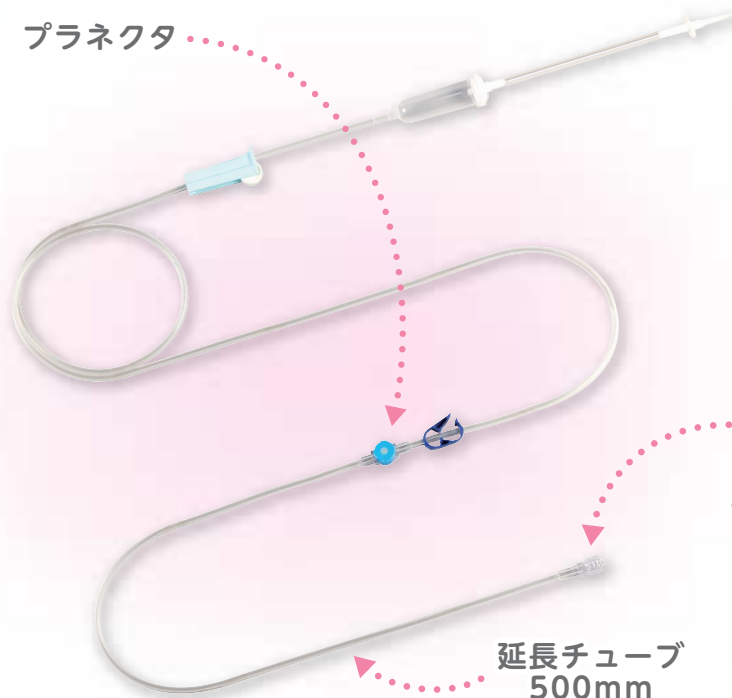


延長チューブ
500mm

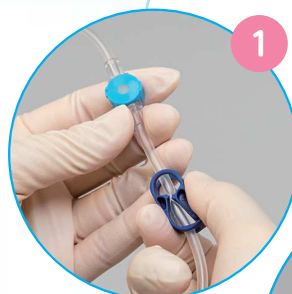

1

ワンショット時などは、プラネクタ上部のミニクランプを閉じて、ゆっくりと注入してください。

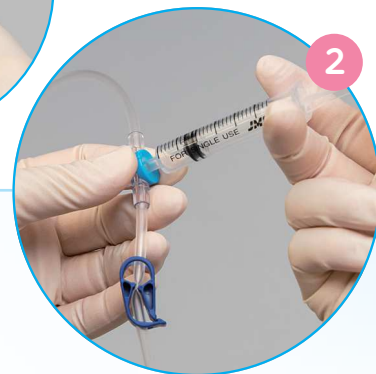

2



フリーロック



持続注入を行う場合は、PNロック付輸液セット（プラネクタ輸液セット 側注用）で接続を行ってください。

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 販売名：プラネクタ輸液セット 医療機器認証番号：21800BZZ10109000



品番	点滴量	JANコード	型式/規格	標準販売価	販売単位	
JY-NP321F5E	1mL ≒ 20滴	4987494315772	DEHPフリー PN×1	3,200円/箱	20本/箱	400本/ケース

一般的名称：自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 販売名：プラネクタ輸液セット 側注用 医療機器認証番号：220AABZX00305000

品番	点滴量	JANコード	型式/規格	標準販売価	販売単位	
JY-ND223PL	1mL ≒ 20滴	4987494073597	直結型プラ瓶針 DEHPフリー	2,000円/箱	20本/箱	400本/ケース

プラネクタ® 輸液ラインシステム



Point
1

消毒しやすい形状

凹凸のないフラットでワイドな形状のためアクセス前の消毒を容易に行えます。(しっかりと2回以上消毒)

Point
2

ノーデッドスペース

輸液中における「薬液だまり」や「エアだまり」のできにくい構造により、輸液管理の様々なリスクを低減します。

金属針や専用のカニューラを必要とせず、ルアータイプのシリンジでアクセスが可能です。

(プラネクタの接続には、注射針を使用しないでください。)

“プラネクタ”はジェイ・エム・エスの登録商標です。



<http://www.jms.cc/>

製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

■お問い合わせ先
製品情報センター ☎0120-901-509 (受付時間：9:00~17:30)
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

2019.10-JMS