

穿刺部被覆・保護用パッド付絆創膏

アクセスバン

アルギン酸塩パッドで、しっかり血液を吸収




● アクセスバンの特長

アクセスバンは、アルギン酸塩を繊維状にし、不織布にしたアルギン酸塩パッドを採用しました。



テープが
穿刺方向に沿って
楕円のため
穿刺部を押さえ
やすい

アルギン酸塩
パッドで
血液を吸収

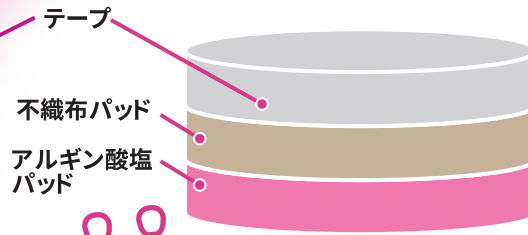

肌に優しい
アクリル系
粘着剤を使用

アルギン酸塩
パッドが
ポイント!

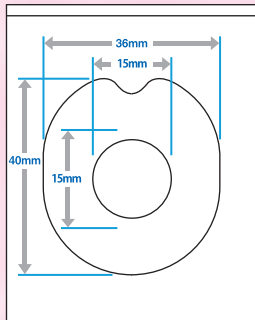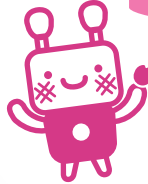

パッドはΦ15mm
の大型サイズ

楕円に
することで
貼付け部分を
ワイドに

留置針固定
位置に
くぼみを形成

● アクセスバンの使用方法



1 個包装より
滅菌袋を開きます。



2 片方の剥離紙を
途中まではがし、
アクセスバンを
取り出します。



3 穿刺部に
パッドを当てて
貼ります。



4 もう片方の
剥離紙をはがし、
テープ全体を
押さえながら
貼ります。

製品名	品番	JANコード	個箱入数	外箱入数
アクセスバン	JW-ACB	4987494346103	200 枚 / 箱	10 箱 / ケース

単回使用 エチレンオキシド滅菌済

販売名: アクセスバン 一般的名称: 救急絆創膏 医療機器届出番号: 25B3X10005000010



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
■お問い合わせ先 東京本社 TEL 03-6404-0602



製造販売業者
ピアック株式会社
〒523-0051 滋賀県近江八幡市八木町 359