

Nadeshiko®




塞栓コイル適合性と  
末梢血管到達性の両立を実現

# 特長

## 塞栓コイル適合性


内径を広く保つことで、塞栓コイルの使用に適しています。

## 末梢血管到達性

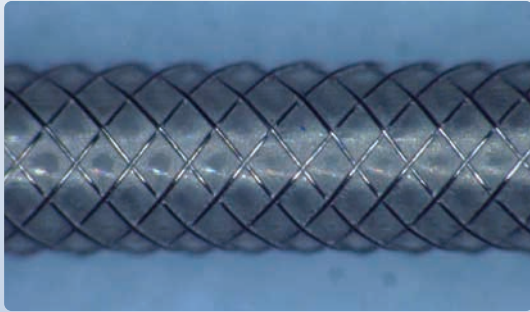

ブレードピッチを最適化し、柔軟性とカテーテル直進性を向上しました。


— 現行品 — 改良品 — 他社製品

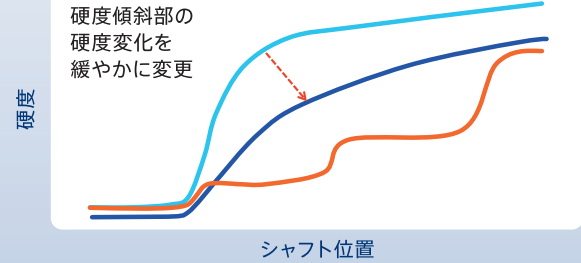

硬度変化を緩やかに変更することでスムーズに力が伝わるようになりました。

# フローレート

流量 mL/sec

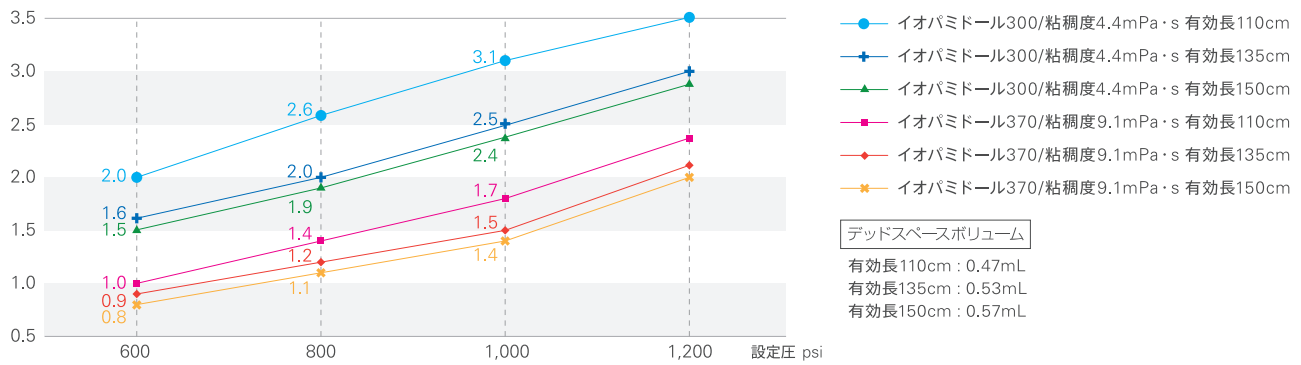

<フローレート測定条件>

装置: Mark V ProVis (日本メドラッド社製) 操作条件: 造影剤温度: 37°C, Injection Pressure Limit: 600psi, 800psi, 1,000psi, 1,200psi  
 Linear Rise: 0.3sec Flow: 4.0mL/sec Injection volume: 12mL

\*上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用条件においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

# 規格一覧

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性コーティング長 (cm)	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)					
					先端部	手元部	先端部	手元部				
JX-M11P12420	4987494288588	110	80	ストレート	2.0/0.68	2.4/0.79	0.020/0.51	0.023/0.58				
*JX-M72P12420	4987494288601			アングル								
JX-M71P12420	4987494288557			スワンネック								
*JX-M73P12420	4987494288625			Wアングル								
JX-M11P32420	4987494288564	135		ストレート					2.0/0.68	2.4/0.79	0.020/0.51	0.023/0.58
*JX-M72P32420	4987494288618			アングル								
JX-M71P32420	4987494288595			スワンネック								
*JX-M73P32420	4987494288571			Wアングル								
JX-M11P52420	4987494288632	150	ストレート	2.0/0.68	2.4/0.79	0.020/0.51	0.023/0.58					

\*受注生産規格

<製品仕様>

適合ガイドワイヤ最大外径: 0.018" (0.46mm) 適合ガイディングカテーテル最小内径: 0.032" (0.81mm)  
 最大注入圧: 1,200psi (8,400kPa) 附属品: 1mLシリンジ 1本

販売名: ナデシコ 医療機器承認番号: 21200BZZ00459000 保険償還区分: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型・ブレードあり



製造販売業者  
**株式会社 ジェイ・エム・エス**  
<http://www.jms.cc>

■お問い合わせ先

東京本社 治療デバイス営業部 TEL 03-6404-0603  
 〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル