

陰圧コントローラ VC-1

Vacuum Controller



**Compact
&
Simple**


陰圧コントローラ VC-1

Vacuum Controller

安全性、視認性、操作性に優れた
陰圧コントローラ



状態変更用ハンドル

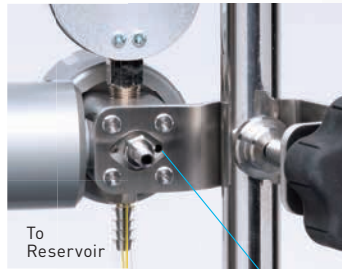

通気孔



圧力調整用ハンドル

基本性能

- -10～0kPaの調整範囲で、想定されるリザーバ内の圧・流量の変動にも追従
- 見やすい大型アナログゲージ
- kPaとmmHgの併記

安全機構

- 圧力調整用ハンドルの可動域規制と陰圧開放弁の搭載により、-13.3kPa (100mmHg) を超えない設計
- 調整可能な大型ハンドル

仕様

項目	仕様
販売名	陰圧コントローラ VC-1
品番	JM-VC1
一般的名称	人工心肺用陰圧コントローラ
JANコード	4987494325269
医療機器承認番号	30200BZX00225000
クラス分類	II:管理医療機器
特定保守管理医療機器	非該当
圧力調整範囲(表示範囲)	-10.0～0.0kPa
圧力調整精度(表示精度)	±1.0kPa
陰圧開放弁	-13.3kPa以下で作動(工場出荷時)
陽圧開放弁	1.5～2.5kPaで作動
圧力ゲージの目盛	2.5kPa間隔(-20.0～0kPa)

項目	仕様
接続対象	静脈血貯血槽 耐久圧:-13.3kPa以下 陽圧開放弁付
	対応チューブ内径 貯血槽側コネクタ:6.0～6.4mm(1/4インチ) 吸引源側コネクタ:6.0～6.4mm(1/4インチ)
動作環境	周囲温度:10～40℃ 相対湿度:30～75%
保管条件	周囲温度:-10～45℃ 相対湿度:30～95%(ただし、結露なきこと)
寸法	155(W)×150(H)×185(D)mm
重量	1.4kg
同梱品	取扱説明書1冊、添付文書1部、 保証書1部、営業所リスト1部
耐用期間	7年[自己認証(当社データによる)]



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc>