


TRANSFUSION TECHNOLOGY

コンポシール モビリアII

高品質なシーリングのための
ポータブルチューブシーラー

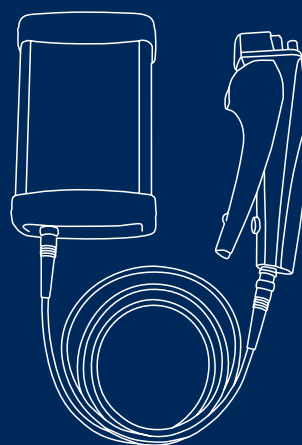

JMS

CompoSeal Mobilea II

持ち運び可能で安全なシーリング技術

モビリア II は、フレゼニウスカービのバッテリー技術により、シーリングに対する高い要求にお応えします。持ち運びしやすい軽量バッテリーでありながら高いシーリング性能を実現した、献血ルームや処置室での可動式シーリングのためにデザインされた製品です。さらに、短いシール時間で確実なシーリングを行うことができます。

コンポシール モビリア II 長充電式の持ち運び可能な軽量シーラー

- リチウムイオンを採用したバッテリーは、フル充電の状態でも、標準的な血液バッグチューブのシーリングが約1,000回まで可能
- 760gの軽量パワーパック、丈夫な金属製の本体、衝撃吸収用のゴムパッドを使用した、可動式使用のためのデザイン
- バッテリー容量に依存しない確実なシーリング
- チューブ径により、シール時間を自動調整



仕様

品名	コンポシール (型式: モビリア II)
品番	9027011
寸法	(パワーパック) 110(L)×52(W)×145(H)mm (ハンドシーラー) 215(L)×65(W)×30(H)mm (電源ユニット) 65(L)×75(W) ^{*1} ×130(H)mm <small>*1: アダプタ含む</small>
重量	(パワーパック) 760g (ハンドシーラー) 315g (電源ユニット) 235g
電氣的定格	AC100V~240V 50/60Hz
対応チューブ径	外径 3~4.6mm チューブ厚 0.8mm以下
1回の充電で使用可能なシール数	約1,000回
構成	電源ユニット、パワーパック、ハンドシーラー、電源アダプタ、RFケーブル、携帯用ケース

非医療機器



販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

TEL 0120-923-107 <https://www.jms.cc/>



FRESENIUS
KABI

caring for life

輸入業者

フレゼニウスカービジャパン株式会社

<https://www.fresenius-kabi.com/jp/>