

「プラスチックカニューラ」一部規格変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、この度、販売名「プラスチックカニューラ」の一部規格につきまして、下記の通り規格廃止し、販売名「プラスチックカニューラCF」へ移行致しますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

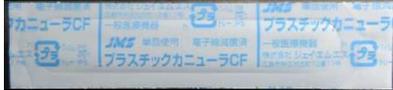	変更前	変更後
外観		
個包装		
内箱		
外箱		
変更点	流路内気泡の視認性を高めるため、色調をホワイトから半透明のグリーンに変更 採液性を高めるため、液窓（通水口）を2カ所から1カ所へ変更	

※標準販売単価の変更はございません。

対象規格

■変更前

販売名：プラスチックカニューラ

医療機器届出番号：34B1X00001000031

品番	型式	JANコード	包装単位
JV-PC13W	P 13mm	4987494252633	100本×40箱=4,000個

■変更後

販売名：プラスチックカニューラ CF

医療機器届出番号：34B1X00001000123


品番	型式	JANコード	包装単位
JV-PCCF12G	P 12mm	4987494359424	100本×40箱=4,000個

使用方法

■穿刺

ゴム栓への刺通はリップの手前までとしてください。


リップがゴム栓を刺通すると、ゴム栓が裂け、液漏れが生じるおそれがあります。

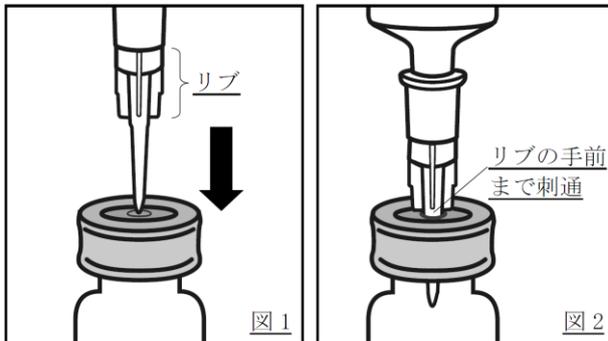

■採液

液窓が1カ所になったことで、採液の際に液窓方向の角度によって採液性が変わります。

残液が少ない場合は、注射針同様の手技で、カニューラを回転させながら採液してください。

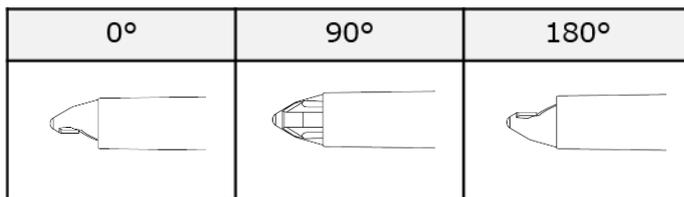

変更時期

廃止規格の製品在庫がなくなり次第、移行規格の製品が出荷となります。

なお、移行規格の出荷は、2024年6月頃を予定しております。

※出荷時期は在庫状況により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

以上